

0 см




Холодовий елемент, який знаходиться в металевій термоємності **ЗАМОРОЖУВАТИ НЕ МОЖНА!**  
Охолодження не менше +4°C в холодильнику

## ЗБІР ТКАНИНИ ПУПОВИНИ

**ЗАБІР ТКАНИНИ ПУПОВИНИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІСЛЯ ЗБОРУ ПУПОВИННОЇ КРОВІ!**

**Ось такої довжини повинен бути відібраний шматок пуповини**

1

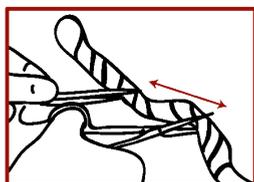


Відрізати фрагмент довжиною **20см.**, візуально найкращий

2




Очистити його **сухою стерильною** серветкою від залишків крові/ меконію

3

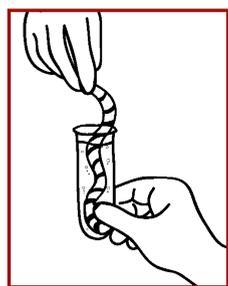

Відкрити пробірку з транспортним середовищем, що знаходилась в металевій термоємності, і помістити в неї фрагмент пуповини.

4

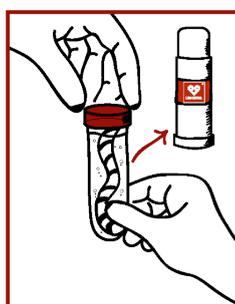

Щільно закрити пробірку, промаркувати її і разом з холодним елементом помістити в термостійку ємність  
**Пам'ятка: заморозувати не можна!**

5



Термостійку ємність помістити у брендovanу сумку Сімейного банку пуповинної крові «ГЕМАФОНД»  
**Будь ласка, не забудьте промаркувати пробірку з фрагментом пуповини**



**Якщо в наборі міститься 2 пробірки для збору пуповини – потрібно зібрати два шматки пуповини довжиною 15-20 см**

## ЗБІР ПЛАЦЕНТИ

**проводиться у спеціальний стерильний пакет, що знаходиться в прозорому контейнері**

1 Відриваємо по перфорації тонку смужку у верхній частині пакету.

2 За жовті «вушка» відкриваємо пакет.

3 Плаценту очищаємо сухою серветкою від залишків крові та поміщуємо до пакету

4 Додаємо розчин антибіотику/ антимікотику, що йде в наборі (прозора пробірка з контейнеру) та додаємо 100 мл фізіологічного розчину.

5 Звільняємо пакет від залишків повітря та скручуємо верхню частину пакету донизу.

6 Загортаємо краї та скручуємо між собою металеві закрутки

7 Маркуємо пакет з плацентою наліпкою що йде в наборі та поміщаємо до прозорого контейнера, а потім до термоконтэйнеру.



20 см

ОБОВ'ЯЗКОВО ПОВІДОМТЕ ПРО ЗБІР БІОМАТЕРІАЛУ «ГЕМАФОНДУ»

ЗА ТЕЛ.: У КИЄВІ (044)496-09-26, (098)496-09-26 В ІНШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ (067)214-13-29