



ОБОВ'ЯЗКОВО ДЕЗІНФІКУЙТЕ МІСЦЕ ВЕНОПУНКЦІЇ!

(ОДИН РАЗ 5% РОЗЧИНОМ ЙОДУ, А ПОТІМ ДВІЧІ 70% ЕТИЛОВИМ СПИРТОМ)




ЗБІР ПУПОВИННОЇ КРОВІ

**БУДЬ ЛАСКА, ДОТРИМУЙТЕСЬ РЕКОМЕНДАЦІЙ
для збору ЯКОМОГО БІЛЬШОГО ОБ'ЄМУ ПУПОВИННОЇ КРОВІ!**

Необхідний мінімальний об'єм - 70 МЛ


ЗБІР ПУПОВИННОЇ КРОВІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОДРАЗУ ПІСЛЯ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ ТА ПЕРЕРІЗАННЯ ПУПОВИНИ.

1

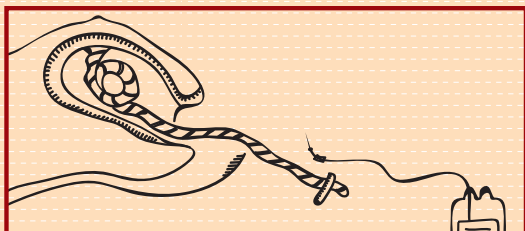

Розмістіть систему для збору пуповинної крові нижче від рівня плаценти, щоб дати змогу пуповинній крові безперешкодно стікати у систему збору (або підніміть плаценту вище рівня системи збору у випадку стрімкого народження плаценти).

2

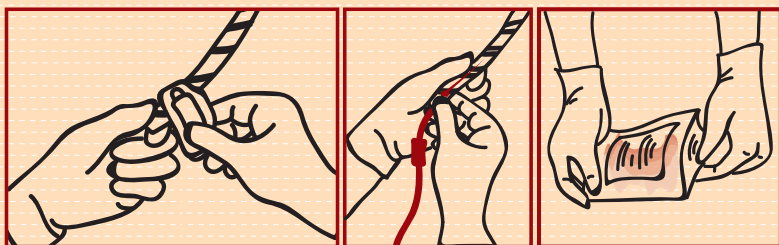


Продезинфікуйте місце пункції пуповини (ділянку пуповини 10-12 см від місця перерізання) і введіть голку системи збору у продезинфіковану ділянку. Кров, що надходить до системи, повільним рухами перемішуйте з антикоагулянтном. Якщо кров не надходить до системи збору, порушайте голкою в пуповині або введіть голку в нове місце пункції, вище попереднього на 2 см, продезинфікувавши його.

3


Після уповільнення або припинення стікання пуповинної крові у систему збору затисніть пуповину вище (у напрямку до плаценти), де візуально прослідковується пуповинна кров у судинах, і, обов'язково продезинфікувавши нове місце пункції, знову введіть голку у вену пуповини.

4

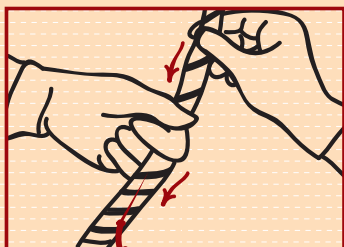


Після припинення надходження пуповинної крові здавіть пуповину пальцями коло плаценти та протяжним рухом вздовж пуповини зженіть залишки пуповинної крові до місця пункції.

5

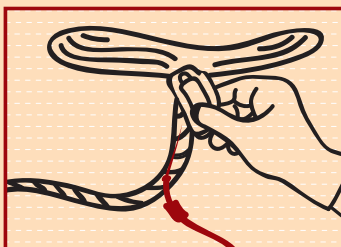


Дочекайтесь народження плаценти, продезинфікуйте ділянку пуповини біля місця її зрощення з плацентою та продовжіть збір пуповинної крові, введіть голку у вену у цій ділянці.

6

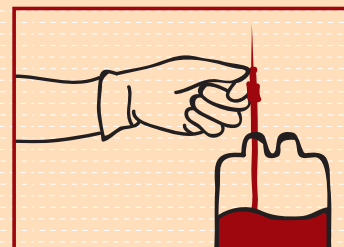


Після остаточного припинення надходження пуповинної крові у систему вийміть голку з пуповини та підніміть її вгору, щоб залишки пуповинної крові з трубки стекли до системи збору.

7

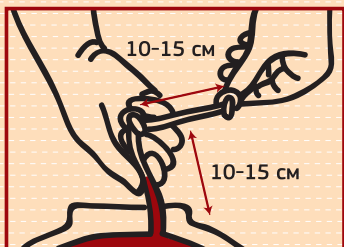

Щільно зав'яжіть два вузли на трубці системи (перший вузол – на відстані 10-15 см від системи збору, другий – 10-15 см від першого). Відріжте голку системи.

8

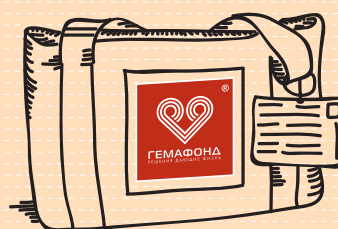

Помістіть систему зі збіраною пуповинною кров'ю у термоконтейнер Сімейного банку пуповинної крові «ГЕМАФОНД», а заповнену супровідну документацію у захисному файлі – у термосумку.

Будь ласка, не забудьте промаркувати пакет з пуповинною кров'ю

КОЖНА КРАПЛЯ - ЖИТТЄВО ВАЖЛИВА!

**ОБОВ'ЯЗКОВО ПОВІДОМТЕ ПРО ЗБІР БІОМАТЕРІАЛУ «ГЕМАФОНДУ» ЗА ТЕЛ.:
У КИЄВІ (044)496-09-26 В ІНШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ (067)214-13-29**

(098)496-09-26

АБО З'ВЯЖІТЬСЯ З ОФІЙНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ «ГЕМАФОНДУ»